

薬毒物簡易検査キット

AccuSignDOA シリーズ



アキュサインDOAシリーズは、イムノクロマトグラフィー手法を利用した簡便な薬物判定キットです。ヒト尿中に存在する薬物類をワンステップで簡易的に定性・検出します。

所定量の尿をプレートに滴下することで、試料はメンブレン上を浸透・移動、薬物誘導体と尿中に存在する薬物との間の競合反応により、3分～10分以内に判定結果を得ることができます。簡便で迅速性に優れ、現場レベルでの検査・判定に最適です。

マルチタイプ

複数の薬物を同時に検出可能な薬毒物簡易検査キットのマルチタイプです。

製品番号	製品名	包装	価格(¥)
New 49502-27	Status DS10 (MET/AMP/THC/OPI/COC/BAR / BZO / TCA/PCP/MTD)	25test	98,000
49502-25	Status DS8 (AMP/THC/OPI/COC/BAR / BZO / TCA/PCP)	25test	80,000
49502-20	AccuSign® One-step DOA4 (THC/OPI/COC/MET)	35test	75,000
49502-21		10test	28,000
49502-18	AccuSign® One-step DOA4 (THC/OPI/COC/AMP)	35test	75,000
49502-19		10test	28,000

Princeton BioMeditech Corporation 社製


検出感度

●MET...1000ng/mL ●AMP...1000ng/mL ●THC...50ng/mL ●OPI...300ng/mL ●COC...300ng/mL
●BAR...300ng/mL ●BZO...300ng/mL ●TCA...1000ng/mL ●PCP...25ng/mL ●MTD...300ng/mL

▼ Status DS8 の使用方法 (例: cat.No.49502-25)


《操作方法・判定》

①プレートを袋から取り出し、尿を付属のスポイトで滴下する。(3滴: 約110μL)

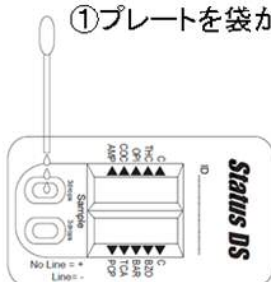

②5～10分後の結果を確認する。

◇赤紫色のラインが現れていれば・・・陰性(－)
◆赤紫色のラインが無ければ・・・陽性(＋)
コントロール(C)ゾーンにラインが無ければ無効とする。
(若干でもラインがあれば、陰性(－)と判断する。)

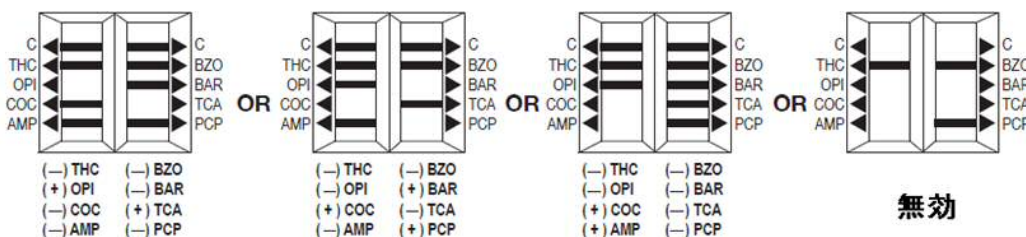

※本品は、試験研究用です。取扱説明書の内容を踏まえ、正しくお使いください。

【その他 アクサイン DOA シリーズ】

高感度タイプ

これまでの検出感度 1000ng/mL より高感度のキットです。

製品番号	製品名	検出感度	包装	価格(¥)
49502-22	AccuSign® MET500	500ng/mL	35test	22,000

単一タイプ

製品番号	製品名	検出感度	包装	価格(¥)
49502-00	AccuSign® One-step MET(メタンフェタミン)	1000ng/ml	35test	22,000
49502-10		1000ng/ml	10test	8,500
49502-01	AccuSign® One-step AMP(アンフェタミン)	1000ng/ml	35test	22,000
49502-11		1000ng/ml	10test	8,500
49502-02	AccuSign® One-step THC(大麻代謝物)	50ng/ml	35test	22,000
49502-12		50ng/ml	10test	8,500
49502-03	AccuSign® One-step OPI(モルヒネ系麻薬)	300ng/ml	35test	22,000
49502-13		300ng/ml	10test	8,500
49502-04	AccuSign® One-step COC(コカイン系麻薬)	300ng/ml	35test	22,000
49502-14		300ng/ml	10test	8,500
49502-05	AccuSign® One-step BAR(バルビツール酸類)	300ng/ml	35test	22,000
49502-15		300ng/ml	10test	8,500
49502-06	AccuSign® One-step BZO(ベンゾジアゼピン類)	300ng/ml	35test	22,000
49502-16		300ng/ml	10test	8,500
49502-09	AccuSign® One-step TCA(三環系抗うつ剤)	1000ng/ml	35test	22,000
49502-17		1000ng/ml	10test	8,500
49502-07	AccuSign® One-step PCP(フェンシクリジン類)	25ng/ml	35test	22,000
49502-24		25ng/ml	10test	8,500
49502-08	AccuSign® One-step MTD(メサドン)	300ng/ml	35test	22,000
49502-23		300ng/ml	10test	8,500

■MET ...Methamphetamine

■AMP ...Amphetamine

■THC ...11-nor- Δ^9 -THC-9-COOH

■OPI ...Opiates(Morphine)

■COC ...Cocaine(Benzoylecgonine)

■BAR ...Barbiturates

■BZO ...Benzodiazepines

■PCP ...Phencyclidine

■MTD ...Methadone

■TCA ...Tricyclic antidepressants(TCAs)

【合成カンナビノイド類、MDMA 簡易検出キット】

製品番号	製品名	対象化合物	包装	価格(¥)	メーカー
49502-97	DRUG CHECK® K2/Spice Test	合成カンナビノイド類 (JWH-018,073 など)	25test	29,000	Express Diagnostics Int'l Inc.
49002-75	Sure Step MDMA	MDMA 500ng/mL	40test	28,000	Innovacon, Inc.

※Drug Check K2/Spice Test の検出対象化合物の詳細については、別途リーフレットおよび取扱説明書をご用意しております。

【関連製品】

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
24165-96	リーベルマン試薬	薬毒物分析用	10 回分	近日発売
14165-96	エールリッヒ試薬	薬毒物分析用	10 回分	近日発売
26010-96	マルキス試薬	薬毒物分析用	10 回分	7,000
37492-96	シモン試薬	薬毒物分析用	10 回分	6,500
31115-96	有機りん系農薬検出キット	薬毒物分析用	10 回分	11,000
01601-96	アセトアミノフェノン検出キット	薬毒物分析用	10 回分	11,000
37483-96	アジ化ナトリウム簡易検出キット	薬毒物分析用	10 回分	11,000


関東化学株式会社
 試薬事業本部 試薬部

103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1090

541-0048 大阪府中央区瓦町2丁目5番1号 (06) 6231-1672

812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361

<< <http://www.kanto.co.jp> E-mail: reag-info@gms.kanto.co.jp >>